

Rotations-Schwingungsspektren von Molekülen

Physikalisches Fortgeschrittenenpraktikum

Projektgruppe: Fynn Kanja (3780065)
Valentino D'Agosto (3763229)

Versuchsleiter: Dr. Chris Sturm

Versuchsdatum: 23.06.2026

Fakultät für Physik und Geowissenschaften
Universität Leipzig

Zusammenfassung

Es werden spektroskopische Untersuchungen an Wasserdampf, Polystyrol, Glas, Natriumchlorid und Chlorwasserstoff im infraroten Spektralbereich durchgeführt. Als Messmethode dient die Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie (FTIR), bei der die als Interferogramme aufgenommenen Rohdaten durch eine Fourier-Transformation in ein Wellenzahlspektrum überführt werden. Zunächst wird die Wellenzahlskala des Spektrometers Perkin Elmer Spectrum 100 anhand der Kalibrierbanden von Wasserdampf und Polystyrol überprüft. Anschließend werden der Einfluss von Interferogrammlänge, Zerofilling und Apodisation auf das Spektrum sowie das theoretische Auflösungsvermögen diskutiert. Es folgen die Untersuchung des Sperrverhaltens von Glas- und NaCl-Filtern sowie die Bestimmung der Spaltbreite einer Küvette mit der Interferenzmethode. Kernstück ist die Analyse des Rotations-Schwingungsspektrums von Chlorwasserstoff (HCl), aus dem die molekülspezifischen Kenngrößen (Schwingungswellenzahl, Rotations- und Dehnungskonstante, Kernabstand, Trägheitsmoment) sowie das Isotopenverhältnis und die Gastemperatur bestimmt werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Aufgabenstellung	2
3	Theoretische Grundlagen	3
3.1	Rotation eines zweiatomigen Moleküls	3
3.2	Schwingung eines zweiatomigen Moleküls	4
3.3	Rotations-Schwingungsspektren	5
3.4	Wechselwirkung von Rotation und Schwingung	6
3.5	Intensität des Spektrums (Bjerrum'sche Doppelbande)	6
3.6	Interferenzmethode zur Schichtdickenbestimmung	7
3.7	Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie	8
3.7.1	Funktionsweise	8
3.7.2	Diskrete Fourier-Transformation, Auflösung und Zerofilling	8
3.7.3	Leakage-Effekt und Apodisation	9

1 Einleitung

Die Infrarotspektroskopie ist eine der wichtigsten experimentellen Methoden zur Bestimmung von Materialeigenschaften in allen drei Aggregatzuständen. Neben der Untersuchung von Gitterschwingungen, Defekten und Ladungsträgern in Festkörpern gehört insbesondere die Charakterisierung von Molekülen in Gasen zu ihren Hauptanwendungsgebieten. Die Grundlage der IR-Spektroskopie wurde mit der Entdeckung der Infrarotstrahlung durch Friedrich Wilhelm Herschel um 1800 gelegt. Zwei weitere Meilensteine sind die Erfindung des Michelson-Interferometers 1891 sowie die Erkenntnis von Lord Rayleigh, dass sich das Spektrum durch eine Fourier-Transformation aus dem Interferogramm berechnen lässt. Wegen des hohen Rechenaufwands setzte sich die Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie (FTIR) zunächst nicht durch; erst die Entwicklung leistungsfähiger Computer und des schnellen Fourier-Transformations-Algorithmus (FFT) durch Cooley und Tukey 1965 führte zu ihrem endgültigen Durchbruch [7].

Im vorliegenden Versuch werden die physikalischen Eigenschaften eines der einfachsten Moleküle, des zweiatomigen Chlorwasserstoffs HCl, mit dem FTIR-Spektrometer Perkin Elmer Spectrum 100 untersucht. Die theoretische Beschreibung erfolgt anhand des Hantelmodells, aus dessen quantenmechanischer Behandlung sich die im infraroten Spektralbereich beobachtbaren Rotations-Schwingungsübergänge und damit die charakteristischen molekularen Kenngrößen ableiten lassen.

2 Aufgabenstellung

- 1.1 Überprüfung der Kalibrierung der Wellenzahlskala des Infrarotspektrometers Spectrum 100 anhand der Kalibrierbanden von Wasserdampf und Polystyrol. Die experimentell bestimmten Abweichungen sind aufzutragen und zu diskutieren.
- 1.2 Aufnahme von Interferogrammen des Wasserdampfspektrums mit verschiedenen Spiegelwegen des Interferometers und Überführung in Spektren mittels Fourier-Transformation. Kalibrierung der Wellenzahlskala der so erhaltenen Spektren anhand der Wasserdampfbanden. Bestimmung der Schrittweite des optischen Weges aus der Bandbreite des Spektrums. Diskussion des Einflusses von Interferogrammlänge, Zerofilling und Apodisation auf die Spektren. Angabe des theoretischen Auflösungsvermögens in Abhängigkeit von der Zahl der aufgenommenen Datenpunkte.
- 1.3 Bestimmung der detektierten Signalstärke im Sperrbereich eines Glas- und eines NaCl-Sperrfilters.
- 1.4 Bestimmung der Spaltbreite einer Küvette mit der Interferenzmethode. Dazu ist ΔN über $\bar{\nu}$ aufzutragen und die Spaltbreite samt mittlerem quadratischem Fehler mittels linearer Regression zu bestimmen.
- 1.5 Aufnahme des Rotations-Schwingungsspektrums von gasförmigem Chlorwasserstoff (HCl) mit angemessenem Auflösungsvermögen und Bestimmung der spektralen Lage der Absorptionsbanden. Berechnung der Wellenzahl des reinen Schwingungsübergangs, der Kraftkonstante, der Rotationskonstante, des Kernabstands und des Trägheitsmoments. Weiterhin sind die schwingungsabhängige Rotationskonstante B_n , die Dehnungskonstante D sowie die spektrale Aufspaltung durch die verschiedenen Isotope zu bestimmen. Bestimmung des Häufigkeitsverhältnisses der Isotope mit Hilfe des Lambert-Beer'schen Gesetzes.
- 1.6 Modellierung der Intensitäten der Absorptionsminima im P-Zweig mit Hilfe des theoretischen Absorptionskoeffizienten. Die Temperatur ist dabei als freier Parameter des Modells zu bestimmen.

3 Theoretische Grundlagen

Die zum Verständnis des Versuchs relevanten Konzepte stammen aus der Quantenmechanik, der Optik und der Thermodynamik. Zunächst werden die Freiheitsgrade der Molekül- und Atombewegung sowie deren Wechselwirkung behandelt, anschließend die theoretischen Hintergründe der Messmethoden. Die Darstellung folgt dem Hantelmodell: Die beiden Atome werden als Punktmassen aufgefasst, die durch Bindungskräfte auf einem bestimmten Abstand gehalten werden. Die Hantel kann rotieren und schwingen, wobei die Frequenzen von den Atommassen, den Bindungskräften und der Wechselwirkung zwischen Rotation und Schwingung abhängen und im infraroten Spektralbereich liegen. Da beim HCl-Molekül das periodische Schwingen des positiv geladenen Wasserstoffatoms gegen das negativ geladene Chloratom ein periodisch wechselndes Dipolmoment erzeugt, sind dessen Rotationen und Schwingungen *infrarotaktiv* und können durch infrarotes Licht angeregt werden [1, 3, 4].

3.1 Rotation eines zweiatomigen Moleküls

Als Ausgangspunkt dient das Hantelmodell: Zwei punktförmige Massen m_1 und m_2 befinden sich im Abstand r_0 und werden durch eine masselose starre Stange auf konstantem Abstand gehalten (Abb. 1). Die Rotationsachse verläuft durch den Massenschwerpunkt S ; der Schwerpunktsatz lautet

$$m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 = 0. \quad (1)$$

Mit dem Abstand $r_0 = r_1 + r_2$ folgt für das Trägheitsmoment

$$I = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 = r_0^2 \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} = \mu r_0^2, \quad (2)$$

wobei die *reduzierte Masse* μ über

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \quad (3)$$

definiert ist. Das Problem ist damit äquivalent zur Rotation einer einzelnen Punktmasse μ im Abstand r_0 von der Drehachse.

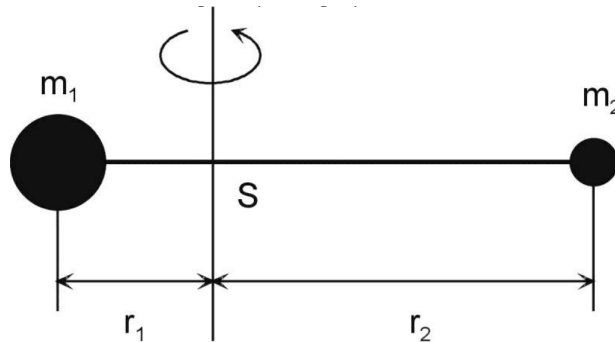


Abbildung 1: Hantelmodell eines zweiatomigen Moleküls. Die beiden Atome werden als punktförmige Massen m_1 und m_2 betrachtet, die auf dem festen Abstand r_0 gehalten werden. Die Rotationsachse geht durch den Massenschwerpunkt.

Die Energieeigenwerte ergeben sich aus der Schrödinger-Gleichung. Da die Rotation potentialfrei ist ($U = 0$), lautet diese in Kugelkoordinaten für den starren Rotator

$$\frac{1}{r_0^2} \left\{ \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} \right\} + \frac{8\pi^2 \mu E}{h^2} \psi = 0. \quad (4)$$

Ihre Lösung liefert diskrete Energieeigenwerte

$$E(J) = \frac{h^2}{8\pi^2\mu r_0^2} J(J+1), \quad J = 0, 1, 2, \dots \quad (5)$$

mit der ganzzahligen Rotationsquantenzahl J . Da in der IR-Spektroskopie mit Wellenzahlen gearbeitet wird und $[\bar{\nu}] = [E/hc]$ gilt, fasst man die Konstanten zur *Rotationskonstante*

$$B = \frac{h}{8\pi^2c\mu r_0^2} = \frac{h}{8\pi^2cI} \quad (6)$$

zusammen. Der Rotationsterm $F(J) = E(J)/hc$ hat die Dimension einer Wellenzahl:

$$F(J) = B J(J+1), \quad J = 0, 1, 2, \dots \quad (7)$$

Quantenmechanisch sind nur Übergänge mit der Auswahlregel

$$\Delta J = \pm 1 \quad (8)$$

erlaubt. Die zu einem Übergang $J \rightarrow J+1$ gehörende Wellenzahl beträgt somit

$$\bar{\nu} = F(J+1) - F(J) = 2B(J+1), \quad J = 0, 1, 2, \dots \quad (9)$$

Das reine Rotationsspektrum besteht daher aus äquidistanten Linien mit dem Abstand $\bar{\nu} = 2B$; es liegt im fernen Infrarot (FIR).

3.2 Schwingung eines zweiatomigen Moleküls

Im Gegensatz zur Annahme des starren Rotators sind die beiden Atome nicht durch eine starre Stange, sondern durch Bindungskräfte verbunden. In erster Ordnung lassen sich diese als *harmonischer Oszillator* mit der Kraftkonstante k nähern. Mit den Auslenkungen x_1 und x_2 aus der Ruhelage und $x = x_1 - x_2$ folgt aus den Bewegungsgleichungen die Schwingungsgleichung des harmonischen Oszillators,

$$\ddot{x} = -\frac{k}{\mu} x, \quad (10)$$

mit der Resonanzwellenzahl

$$\bar{\nu}_S = \frac{1}{2\pi c} \sqrt{\frac{k}{\mu}}. \quad (11)$$

Die Kraftkonstante k ist ein Maß für die Bindungskräfte im Molekül. Die quantenmechanische Behandlung über die Schrödinger-Gleichung liefert die diskreten, äquidistanten Energieeigenwerte

$$E(n) = hc\bar{\nu}_S \left(n + \frac{1}{2}\right), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (12)$$

mit der Schwingungsquantenzahl n ; $E(0) = \frac{1}{2}hc\bar{\nu}_S$ ist die Nullpunktsenergie. Nach den quantenmechanischen Auswahlregeln sind nur Dipolübergänge mit

$$\Delta n = \pm 1 \quad (13)$$

erlaubt. Die zugehörige Übergangsenergie $E(n+1) - E(n) = hc\bar{\nu}_S$ ist unabhängig von n ; im reinen Schwingungsspektrum tritt also nur eine einzige Absorptionslinie bei der Resonanzwellenzahl $\bar{\nu}_S$ auf. Der Schwingungsterm lautet

$$G(n) = \frac{E(n)}{hc} = \bar{\nu}_S \left(n + \frac{1}{2}\right). \quad (14)$$

3.3 Rotations-Schwingungsspektren

In der Realität treten Rotation und Schwingung gleichzeitig auf. Vernachlässigt man zunächst die Kopplung zwischen beiden, so ergibt sich die Gesamtenergie des rotierenden Oszillators durch Addition von (5) und (12),

$$E(n, J) = hc B J(J+1) + hc \bar{\nu}_S \left(n + \frac{1}{2}\right), \quad (15)$$

und für den Rotations-Schwingungsterm $T(n, J) = E(n, J)/hc$

$$T(n, J) = B J(J+1) + \bar{\nu}_S \left(n + \frac{1}{2}\right). \quad (16)$$

Die Auswahlregeln lauten nun

$$\Delta J = \pm 1, \quad \Delta n = 0, \pm 1. \quad (17)$$

Übergänge mit $\Delta n = 0$ liefern das reine Rotationsspektrum (FIR). Da beim HCl die Schwingungswellenzahl $\bar{\nu}_S$ sehr viel größer ist als die Rotationskonstante B , spaltet sich die Schwingungsbande in zwei Zweige auf (Abb. 2). Man unterscheidet zwei Fälle:

R-Zweig ($\Delta n = 1, \Delta J = +1$). Die Differenz der Rotations-Schwingungsterme liefert

$$\bar{\nu}_R(J) = T(n+1, J+1) - T(n, J) = \bar{\nu}_S + 2B(J+1), \quad J = 0, 1, 2, \dots \quad (18)$$

P-Zweig ($\Delta n = 1, \Delta J = -1$). Analog ergibt sich

$$\bar{\nu}_P(J) = T(n+1, J-1) - T(n, J) = \bar{\nu}_S - 2B J, \quad J = 1, 2, 3, \dots \quad (19)$$

Wegen $\Delta J = -1$ existiert kein Übergang $P(0)$; der P-Zweig beginnt bei $J = 1$.

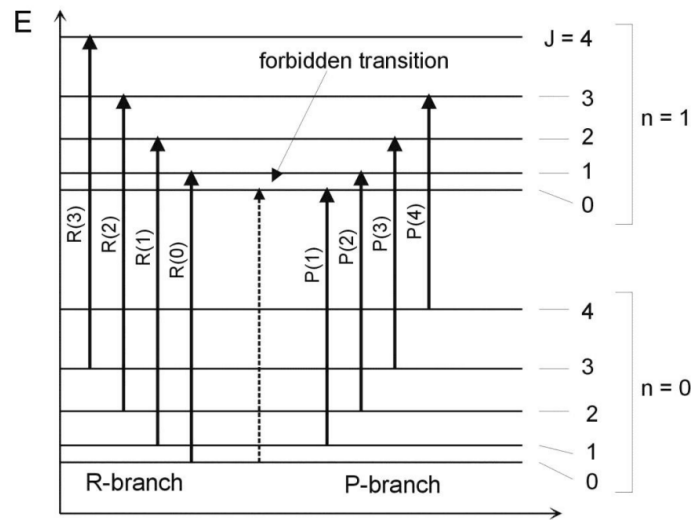


Abbildung 2: Energieniveauschema der rotierenden Schwingungszustände. Die Übergänge mit $\Delta J = \pm 1$ bilden für den Schwingungsmodenwechsel $n = 0 \rightarrow n = 1$ den R- und den P-Zweig aus. Der Übergang mit $\Delta J = 0$ ist verboten.

Da der Übergang mit $\Delta J = 0$ verboten ist, kann bei $\bar{\nu} = \bar{\nu}_S$ keine Linie beobachtet werden (Bandlücke). Aus den Übergangswellenzahlen lassen sich die Kenngrößen des Moleküls bestimmen: Für die Wellenzahl des reinen Schwingungsübergangs gilt

$$\bar{\nu}_R(0) + \bar{\nu}_P(1) = 2\bar{\nu}_S, \quad (20)$$

und die Rotationskonstante erhält man aus

$$\bar{\nu}_R(0) - \bar{\nu}_P(1) = 4B. \quad (21)$$

Der Abstand zweier benachbarter Linien beträgt sowohl im P- als auch im R-Zweig $2B$.

3.4 Wechselwirkung von Rotation und Schwingung

Die hohe Präzision des Spectrum 100 erlaubt es, die Effekte der nicht-starren Molekülachse zu untersuchen. Am Gesamtterm $T(n, J)$ sind zwei Korrekturen anzubringen. Zum einen vergrößert die Zentrifugalkraft der Rotation den Atomabstand und damit das Trägheitsmoment, was zu einer Verringerung der Rotationskonstante führt. Dieser Effekt wird durch einen quadratischen Term mit der *Dehnungskonstante* D ($D \ll B$) berücksichtigt:

$$F(J) = B J(J+1) - D J^2(J+1)^2. \quad (22)$$

Zum anderen bewirken Anharmonizitätseffekte, dass sich der mittlere Atomabstand zwischen den verschiedenen Schwingungszuständen ändert. Damit werden das Trägheitsmoment und die Konstanten B und D von der Schwingungsquantenzahl n abhängig, sodass der Rotationsterm

$$F_n(J) = B_n J(J+1) - D_n J^2(J+1)^2 \quad (23)$$

lautet. Führt man einen laufenden Index i ein ($i = -J$ für den P-Zweig, $i = J+1$ für den R-Zweig), so lassen sich die Wellenzahlen beider Zweige unter den Näherungen $D_n \ll B_n$ und $D_n \approx D_{n+1}$ in einer Gleichung zusammenfassen:

$$\bar{\nu}(i) = \bar{\nu}_S + (B_1 + B_0) i + (B_1 - B_0) i^2 - 2(D_1 + D_0) i^3. \quad (24)$$

Der Index $i = 0$ entspricht dem verbotenen reinen Schwingungsübergang. Zur experimentellen Bestimmung der Konstanten bildet man die erste und zweite Differenz der Übergangswellenzahlen:

$$\Delta\bar{\nu}(i) = \bar{\nu}(i+1) - \bar{\nu}(i) = 2B_1 - 2(D_1 + D_0) + 2i(B_1 - B_0 - 3(D_1 + D_0)) - 6i^2(D_1 + D_0), \quad (25)$$

$$\Delta^2\bar{\nu}(i) = \Delta\bar{\nu}(i+1) - \Delta\bar{\nu}(i) = 2(B_1 - B_0) - 12(D_1 + D_0) - 12i(D_1 + D_0). \quad (26)$$

Aus dem Anstieg der Geraden (26) erhält man $D_1 + D_0$, aus dem Ordinatenabschnitt $B_1 - B_0$; mit (25) können anschließend die Einzelgrößen B_1 und B_0 bestimmt werden.

3.5 Intensität des Spektrums (Bjerrum'sche Doppelbande)

Die Einhüllende der Absorptionslinien hat die Form einer Doppelbande: Die Transmission durchläuft zwei Minima, die dem R- und dem P-Zweig entsprechen. Zur Beschreibung der Intensitäten wird der Absorptionskoeffizient α benötigt. Dieser ist proportional zur Übergangswahrscheinlichkeit, zur Teilchenzahl N im Ausgangszustand und zur Wellenzahl $\bar{\nu}$. Unter der Annahme gleicher Übergangswahrscheinlichkeiten für alle erlaubten Übergänge gilt

$$\alpha = c_2 N \bar{\nu}. \quad (27)$$

Im thermodynamischen Gleichgewicht ist die Zahl der Moleküle mit der Energie E durch die Maxwell-Boltzmann-Verteilung gegeben:

$$N(E) = \frac{\eta}{Q_r} e^{-E/k_B T}, \quad (28)$$

mit der Gesamtteilchenzahl η , der Zustandssumme Q_r , der Boltzmann-Konstante k_B und der absoluten Temperatur T . Dabei ist zu berücksichtigen, dass jeder Zustand mit dem Gesamtdrehimpuls J $(2J + 1)$ -fach entartet ist und bei Raumtemperatur nahezu alle Moleküle im Schwingungsgrundzustand ($n = 0$) vorliegen, da die thermische Energie $k_B T \approx 26 \text{ meV}$ deutlich kleiner ist als die Schwingungsenergie $hc \bar{\nu}_S \approx 400 \text{ meV}$. Einsetzen von (15) in (28) liefert für den Absorptionskoeffizienten

$$\alpha = c_3 \bar{\nu} (2J + 1) e^{-\frac{hcBJ(J+1)}{k_B T}}. \quad (29)$$

Mit dem Lambert'schen Gesetz ergibt sich daraus für die relative Intensität der Absorptionslinien

$$I(J) = I_0 e^{-\alpha d} = I_0 \exp \left\{ c_4 \bar{\nu} (2J + 1) e^{-\frac{hcBJ(J+1)}{k_B T}} \right\}, \quad (30)$$

wobei der Zusammenhang zwischen J und $\bar{\nu}$ aus (24) bekannt ist. Über die Modellierung dieser Intensitätsverteilung lässt sich die Temperatur T als freier Parameter bestimmen.

3.6 Interferenzmethode zur Schichtdickenbestimmung

Wird ein Lichtstrahl durch eine leere Küvette geführt, so wird er an den Grenzflächen mehrfach reflektiert (Abb. 3). Der transmittierte und der mehrfach reflektierte Strahl sind kohärent und interferieren; im Spektrum erscheint dies als periodische Modulation der Intensität. Für senkrechten Einfall ($\beta = 0^\circ$), wie er beim näherungsweise parallelen Strahl des Spectrum 100 vorliegt, beträgt der optische Gangunterschied zwischen dem transmittierten und dem zweifach reflektierten Strahl

$$\Delta = 2n_0 d, \quad (31)$$

mit der Schichtdicke d und dem Brechungsindex n_0 des Mediums.

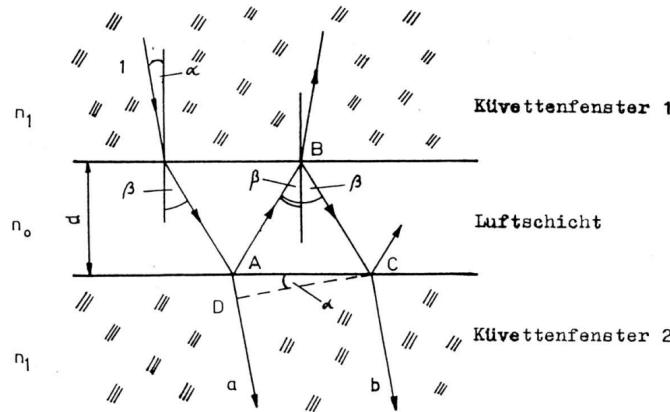


Abbildung 3: Strahlengang durch eine Küvette. Die durch das zweite Fenster austretenden Teilstrahlen a und b stammen aus demselben einfallenden Strahl 1 und sind daher kohärent. Ob sie konstruktiv oder destruktiv interferieren, hängt vom optischen Gangunterschied ab. Für den im Versuch vorliegenden senkrechten Einfall ($\beta = 0^\circ$) vereinfacht sich dieser zu $\Delta = 2n_0 d$.

Konstruktive Interferenz (Transmissionsmaximum) tritt auf, wenn Δ ein ganzzahliges Vielfaches der Vakuumwellenlänge λ ist:

$$2n_0 d = N\lambda = \frac{N}{\bar{\nu}}, \quad N = 0, 1, 2, \dots \quad (32)$$

Betrachtet man zwei Maxima der Ordnungen N_i und N_0 bei den Wellenzahlen $\bar{\nu}(N_i)$ und $\bar{\nu}(N_0)$ und trägt die Ordnungsdifferenz $N_i - N_0$ über die Wellenzahldifferenz auf, so ergibt sich eine Gerade mit dem Anstieg

$$2n_0d = \frac{N_i - N_0}{\bar{\nu}(N_i) - \bar{\nu}(N_0)}. \quad (33)$$

Mit $n_0 = 1$ für Luft lässt sich die Schichtdicke d aus einer linearen Regression bestimmen.

3.7 Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie

3.7.1 Funktionsweise

Ein FTIR-Spektrometer besteht aus einer Strahlungsquelle, einem Interferometer (typischerweise vom Michelson-Typ) und einem Detektor. Ein Strahlteiler spaltet das Licht der Quelle in zwei Teilstrahlen auf, die über einen beweglichen und einen festen Spiegel geführt und anschließend wieder vereinigt werden. Je nach optischem Wegunterschied $s = x_2 - x_1$ interferieren die Teilstrahlen konstruktiv oder destruktiv. Für eine monochromatische Welle der Wellenzahl $\bar{\nu}$ misst der Detektor die Intensität

$$I(s) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(2\pi\bar{\nu}s). \quad (34)$$

Die als Funktion des Gangunterschieds s gemessene Intensitätsverteilung $I(s)$ wird als *Interferogramm* bezeichnet. Für ein kontinuierliches Spektrum $S(\bar{\nu})$ ergibt sich das Interferogramm als Überlagerung aller monochromatischen Beiträge,

$$I(s) = 2 \int_0^\infty S(\bar{\nu}) \cos(2\pi\bar{\nu}s) d\bar{\nu}. \quad (35)$$

Nach Erweiterung des Integrationsbereichs auf $[-\infty, \infty]$ mittels $S(-\bar{\nu}) = S(\bar{\nu})$ folgt, dass das gesuchte Spektrum $S(\bar{\nu})$ die Fourier-Transformierte des Interferogramms ist:

$$S(\bar{\nu}) = \int_{-\infty}^\infty I(s) e^{-2\pi i \bar{\nu}s} ds. \quad (36)$$

3.7.2 Diskrete Fourier-Transformation, Auflösung und Zerofilling

In der Praxis wird das Interferogramm digitalisiert und ist endlich: Es liegen n Messpunkte im konstanten Abstand Δs vor. An die Stelle von (36) tritt daher die diskrete Fourier-Transformation, die üblicherweise mit dem Algorithmus der schnellen Fourier-Transformation (FFT) berechnet wird. Aus der endlichen Weglänge folgt eine begrenzte spektrale Auflösung. Die maximal erreichbare Wellenzahl hängt über

$$\bar{\nu}_{\max} \leq \frac{n \Delta \bar{\nu}}{2} \quad (37)$$

mit dem Punktabstand Δs zusammen, und der Abstand zweier Spektralpunkte beträgt

$$\Delta \bar{\nu} = \frac{1}{n \Delta s}. \quad (38)$$

Ein größerer Spiegelweg (mehr Datenpunkte n) verbessert somit das Auflösungsvermögen. Durch *Zerofilling*, d. h. das Anhängen von Nullen an das Interferogramm, wird die Dichte der Spektralpunkte künstlich erhöht (Interpolation), ohne dass echte Information hinzukommt.

3.7.3 Leakage-Effekt und Apodisation

Die endliche Länge des Interferogramms lässt sich mathematisch als Multiplikation mit einer Rechteckfunktion beschreiben. Deren Fourier-Transformierte ist eine sinc-Funktion, die im Spektrum als eine langsam abklingende Hintergrundschwingung um jede Spektrallinie erscheint. Dieser Effekt wird als *Leakage* bezeichnet. Multipliziert man das Interferogramm stattdessen mit einer zu den Rändern hin sanfter abfallenden Funktion (z. B. Dreieck-, Happ-Genzel- oder Blackman-Funktion), so lässt sich das Leakage unter Einbußen bei der Maximalintensität und der Auflösung verringern. Dieser Vorgang heißt *Apodisation*; für die Auswertung ist ein Kompromiss zwischen geringem Leakage und hohem Auflösungsvermögen zu finden. Da das gemessene Interferogramm im Allgemeinen unsymmetrisch zum Nullpunkt aufgenommen wird, liefert die Fourier-Transformation ein komplexwertiges Spektrum, aus dem mittels *Phasenkorrektur* (z. B. nach der Mertz-Methode) das reelle Spektrum gewonnen wird.

Literatur

- [1] V. Riede (Überarb. C. Kranert): *Rotations-Schwingungsspektren von Molekülen*, Versuchsanleitung zum Fortgeschrittenenpraktikum, Universität Leipzig.
- [2] W. Finkelburg: *Einführung in die Atomphysik*, Springer-Verlag, Berlin/Göttingen/Heidelberg 1958, S. 186 ff und S. 351 ff.
- [3] W. Brügel: *Einführung in die Ultrarotspektroskopie*, Dr. Dietrich Steinkopff Verlag, Darmstadt 1969, S. 9–27.
- [4] G. Herzberg: *Molecular Spectra and Molecular Structure*, Bd. I (Spectra of Diatomic Molecules), D. van Nostrand Comp., Toronto/New York/London 1950.
- [5] D. Geschke: *Physikalisches Praktikum*, B. G. Teubner, Stuttgart/Leipzig 1994.
- [6] W. Demtröder: *Molekülphysik*, 2. Auflage, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, Berlin 2013, S. 91.
- [7] Universität Leipzig, AG Optik/Spektroskopie: *Geschichte der FTIR-Spektroskopie*, <https://polariton.exphysik.uni-leipzig.de/subsites/staff/bundesmann/ftir/geschichte.html> (abgerufen 2024).
- [8] C. P. Rinsland et al.: *The Fundamental Bands of ^{35}HCl and ^{37}HCl : Line Positions from High-Resolution Laboratory Data*, Journal of Molecular Spectroscopy, Vol. 159 (1993).
- [9] D. Gupta, L. Wang, L. M. Hanssen, J. J. Hsia, R. U. Datla: *Polystyrene Films for Calibrating the Wavelength Scale of Infrared Spectrophotometers – SRM 1921*, NIST Special Publication 260-122 (1995).